




Ich bin die Neuzeit in der Revision.
Ich bin **Endo ReStart**.

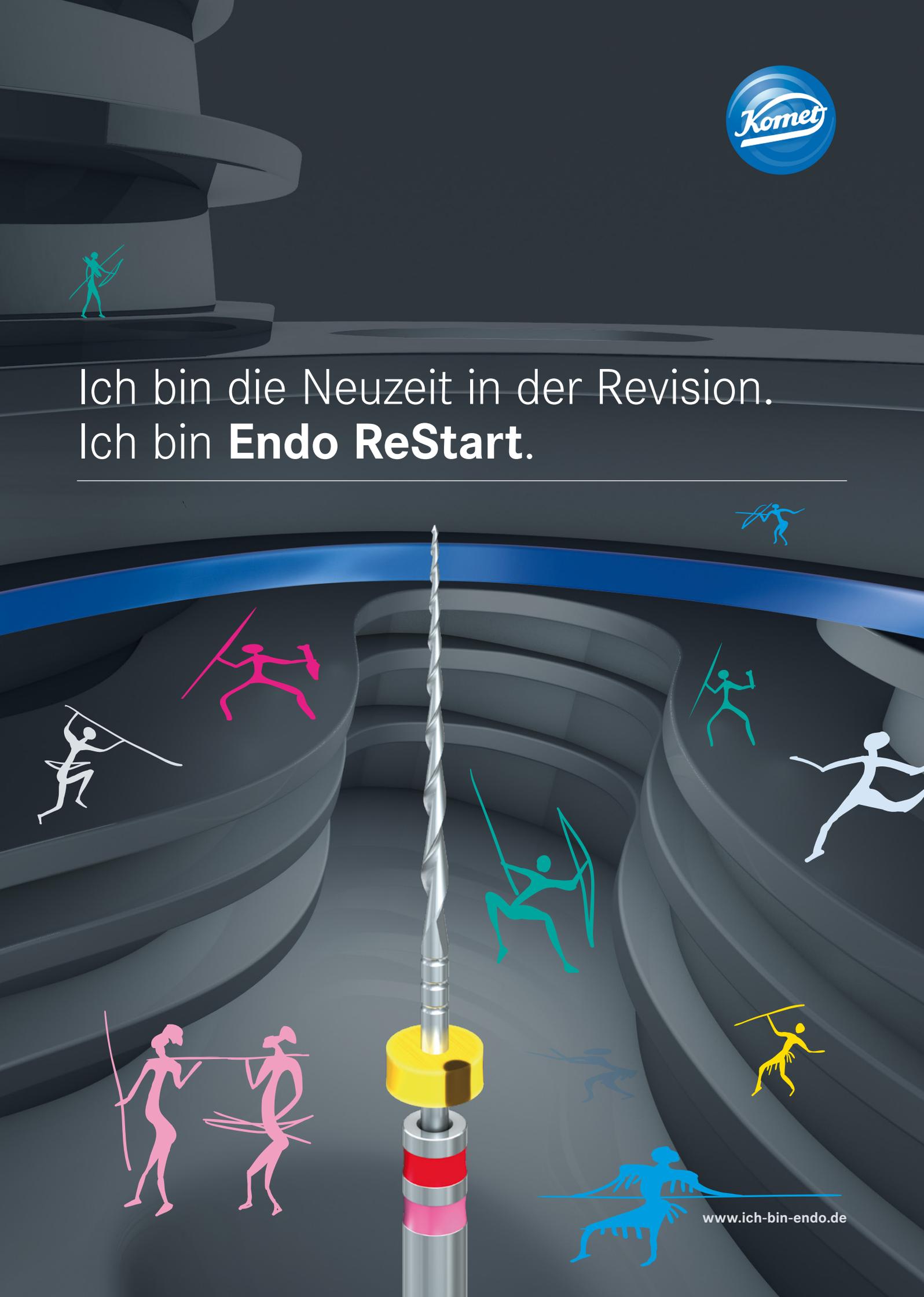

Brasseler®, Komet®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, CompoClip®, CompoStrip®, DC1®, DCTherm®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, MicroPlant®, OptiPost®, PolyBur®, TissueMaster®, TMC® und TissueMaster Concept® sind eingetragene Marken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Stand: Juli 2018



Mit Endo ReStart beginnt eine neue Epoche in der Revision.

- neuartiges Revisionsfeilensystem aus NiTi
- speziell abgestimmte Schneidengeometrie mit dynamic twist für optimales Entfernen der Wurzelfüllungen
- kontrollierte Offensive dank „safe activity“ Instrumentenspitze
- Taper .05 für die perfekte Balance zwischen Stabilität und Flexibilität



Endo ReStart: Revision mit dynamic twist.



Findet die Balance.

Jede Revision stellt eine notwendig gewordene Korrektur einer Endo Behandlung dar. Mit einem konstanten Taper .05 findet Endo ReStart die perfekte Balance zwischen hoher Stabilität und gleichzeitiger Flexibilität, die eine gute Anpassung an verschiedene Kanal anatomien gewährleistet.




Kurz und bündig.

Das Endo ReStart Feilensystem gibt es in zwei Längen, 21 und 25 mm. Darüber hinaus steht dem Behandler bei Bedarf mit dem Endo ReStart Opener ein schnittfreudiges Instrument zum primären Eindringen in sehr hartes Wurzelfüllmaterial zur Verfügung. Somit kann ein Großteil des alten Füllmaterials mit nur 1 - 2 Instrumenten entfernt werden.




Spitzenleistung.

Mit der „safe activity“ Instrumentenspitze hält der Behandler eine optimierte, nicht schneidende Spitze in der Hand, die mit einer Verjüngung versehen ist und somit ein problemloses Einarbeiten in das Füllmaterial ermöglicht. Während der initial eingesetzte Endo ReStart Opener mühelos in das Wurzelfüllmaterial eindringt, verhält sich die Endo ReStart Feile kontrolliert und effektiv im Kanal. Ganz getreu dem Motto: kontrollierte Offensive.

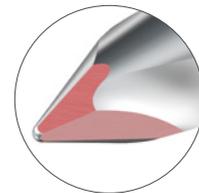

Ein Plus an Dynamik.

Dank einer speziell abgestimmten Schneidengeometrie schafft Endo ReStart eine ganz eigene Qualität, was das effektive Abschaben und Herausfordern des Materials aus dem Kanal angeht. Durch ein Plus an Windungen an der Instrumentenspitze schraubt sich die Feile spürbar in die Wurzelfüllung. Im Verlauf des Arbeitsteils wird der Abstand zwischen den Windungen größer, damit das Material optimal aus dem Kanal befördert wird und die Feile immer unter Kontrolle bleibt. Darunter verstehen wir „dynamic twist“.

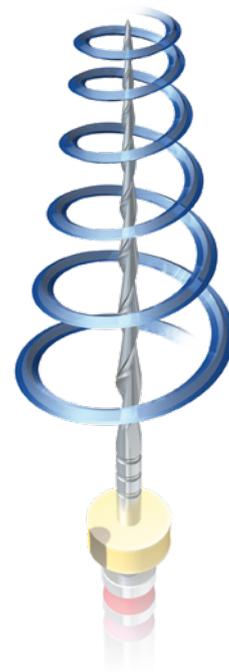

Step by Step.



[01] Entfernen der Wurzelfüllung im koronalen Drittel mit dem Endo ReStart Opener.

[02] Entfernen der übrigen Wurzelfüllung mit der Endo ReStart Feile.

[03] Finale Präparation des Wurzelkanalsystems.

Unser Tipp: Verwenden Sie zur Aufbereitung unsere F6 SkyTaper.



☞_{opt.} 300 min⁻¹
Torque: 1,8 Ncm


Endo ReStart: Der schnellste Weg zur sicheren Revision.

Endo ReStart Systemübersicht:



●○ RE10L15.204.030 030/10
Endo ReStart Opener
Länge: 15 mm

STERILE R

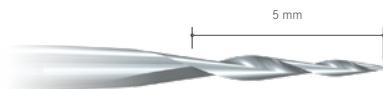

●○ RE05L21.204.025 025/05
Endo ReStart Feile
Länge: 21 mm

STERILE R



●○ RE05L25.204.025 025/05
Endo ReStart Feile
Länge: 25 mm

STERILE R



Einführungsset 4680

2x Endo ReStart Opener
4x Endo ReStart Feile

Länge: 25 mm



Dr. Giuseppe Squeo

Endodontie-Spezialist und Ideengeber
für die Endo ReStart Feilen, Italien

„Mein Alltag besteht zum größten Teil aus endodontischen Behandlungen. Und hier macht die Revision bestimmt 50% der gesamten Arbeit aus.

Darum habe ich immer nach einem Instrument gesucht, das diesen Teil der Endo schneller und einfacher macht: also die direkte und möglichst vollständige Entfernung des im Wurzelkanal vorhandenen Materials.

Tatsächlich ist die „safe activity“ Instrumentenspitze der Endo ReStart Feile auf dem Gebiet etwas Besonderes. Sie dringt ohne Weiteres in sehr harte und kompakte Materialien ein. Dabei ist sie sehr flexibel und entfernt auch alte Füllungen aus gekrümmten Wurzelkanälen problemlos. Die Endo ReStart Feilen sind darum zu einem festen Bestandteil meines alltäglichen Instrumentariums geworden.“

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de

